

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Garantimos o conserto ou reposição gratuita deste produto se o mesmo estiver no prazo de 12 meses de compra (inclusive acessório) e for provado que há defeito na fabricação ou nos materiais.
2. Mediante apresentação da fatura original ou a nota de venda com a data do pedido ou carimbo do distribuidor junto da peça com defeito.
3. A garantia não cobre falhas no produto causadas pelo uso de outros acessórios periféricos que não pertencem à marca original Vitalysplus no aparelho.
4. A garantia não cobre falhas ocasionadas por modificação, reparo ou tentativa de desmontar o aparelho por qualquer pessoa não autorizada pelo fabricante.
5. A garantia cobre produtos adquiridos apenas no Brasil e é aplicável em todo o território nacional.
6. Qualquer unidade ou peças avariadas se tornam propriedade do fabricante.

A garantia não cobre nenhum defeito ou dano causado por uso incorreto, indevido ou decorrente de:

- a. Operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) às superfícies do produto, resultantes do uso incorreto;
- b. Contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos;
- c. Sujeitar o produto a uso ou condições anormais;
- d. Outros atos que não sejam faltas da AXT Telecomunicações Ltda. são excluídos da cobertura.
- e. Serviço não autorizado ou modificação.

Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de qualquer forma efetuados pelo próprio usuário ou por alguma outra companhia que não a AXT Telecomunicações Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.

Produtos Alterados.

Produtos com:

- a. Etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas;
- b. Lacs quebrados ou que mostrem sinais de adulteração;
- c. Números de série de placas discordantes; ou
- d. Peças de marca que não seja Vitalysplus ou que não cumpram as exigências são excluídas da cobertura.

Compromisso da AXT Telecomunicações Ltda.

Ressalvadas as exclusões acima, a AXT Telecomunicações Ltda., a seu critério, reparará ou substituirá sem cobrança de encargos, ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos que não estejam em perfeito funcionamento, de acordo com esta garantia.

Em tais casos, a AXT Telecomunicações Ltda. utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes.

Em caso de dúvida, ligue para: **4003-6480** nas capitais e regiões metropolitanas ou (ligação local) 0xx11 **4003-6480** em cidades do interior (ligação interurbana) ou acesse www.vitalysplus.com.br

Escova Dental Elétrica

VRT-1



As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Salvo disposição em contrário, a reprodução deste manual é proibida.

Importado e distribuído por AXT Telecomunicações Ltda. Rodovia BA 262, Km 04, Galpão B. Distrito Industrial – Ilhéus / BA – Brasil. CNPJ: 03.987.645/0001-58. Fabricado na China

 Vitalys Plus
vitalysplus.com.br

Escova Dental Elétrica


VRT-1

A escova dental elétrica Vitallys Plus, possui movimento de 30.000 vibrações sônicas por minuto, que limpam profundamente as gengivas e os dentes removendo as placas bacterianas, ajudando a prevenir e reduzir problemas de gengiva e cáries, garantindo um hálito fresco e um sorriso saudável.

Para utilizar este produto de forma segura e eficaz, siga as instruções abaixo:

Leia cuidadosamente estas instruções antes do uso:

- Caso o produto apresente defeito, não tente repará-lo. Há risco de choque elétrico.
- Este produto é aconselhado apenas para o uso adulto.
- Se o produto for derrubado, a cabeça da escova deve ser substituída antes da próxima utilização, mesmo se o dano não for visível.

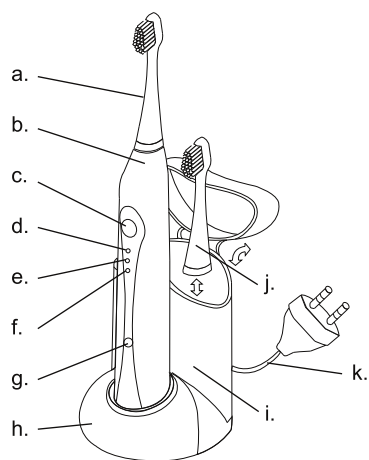

- | | |
|---|--|
| a. Cabeça da escova dental | f. Indicador luminoso (modo "massage") |
| b. Escova | g. Indicador de carga |
| c. Botão liga / desliga & modo de escovação | h. Base de recarga |
| d. Indicador luminoso (modo "high") | i. Suporte para as cabeças dentais |
| e. Indicador luminoso (modo "soft") | j. Cabeça dental extra |
| | k. Plugue de tomada |

Conexão e Carga

- Esta escova dental elétrica foi projetada para ser utilizada com segurança em ambientes úmidos.
- Para carregar a bateria da escova elétrica, encaixe a escova (b) na base (h) e plugue-a (k) na tomada.
- O indicador de carga deverá acender. Para uma carga completa a escova deverá ficar pelo menos 24 horas carregando, o que permite aproximadamente duas semanas de escovação regular.
- Para uso diário, a escova pode ser armazenada na base para mantê-la sempre na potência máxima.
- Não há risco de sobreaquecimento da bateria.

Usando a escova

Encaixe uma cabeça da escova dental na escova e utilize um creme dental de sua preferência.

Técnica para escovação:

- Guie as cerdas da escova lentamente dente à dente.
- Escove a gengiva, assim como os dentes. Comece com a parte externa dos dentes, depois o interior, terminando com as superfícies de mastigação.
- Não esfregue ou pressione a escova nos dentes.
- Após 30 segundos de escovação, a escova faz uma pequena pausa para que você mude o local de escovação.
- Após 2 minutos de escovação, o aparelho para de funcionar automaticamente.

Modos de escovação

Esta escova oferece 3 modos de escovação para diferentes necessidades de higiene oral:

H: High ————— Excepcional limpeza da boca

S: Soft ————— Limpeza em áreas sensíveis da boca

M: Massage ————— Massagear as gengivas

Alternando entre os modos de escovação:

- Pressione o botão modo de escovação (c) e a escova iniciará automaticamente no modo "H".
- Para mudar do modo "H" para o modo "S", pressione o botão modo de escovação (c) uma segunda vez.
- Se você desejar utilizar o modo "M", pressione o botão de escovação mais uma vez.
- Quando você pressionar o botão modo de escovação (c), acenderá o indicador luminoso do modo atual de trabalho.
- Para desligar a escova, pressione o botão modo de escovação (c), até desligar o dispositivo.

Recomendações de limpeza:

- Após a escovação, remova a cabeça dental da escova e limpe ambas as partes separadamente, sob água corrente.
- Antes de limpar a base de recarga, certifique-se que você a desplugou da tomada. Use apenas um pano seco ou umedecido para limpar a superfície da base de recarga.
- Importante: Nunca limpe a base recarga com água corrente ou imergindo-a em água.
- Coloque a base de recarga em um local seco e seguro.
- Não coloque a escova na base de recarga até que ela esteja completamente seca.

Este produto contém baterias recarregáveis no seu interior.

No final de sua vida útil descarte o produto corretamente. Não descarte-o no lixo doméstico.